

et dagelijks inspuiten met de Novo Pen.

fase 1

1. meng de langwerkend insuline door 20 keer de pen te kantelen.
2. draai de knop op 2 eenheden.
3. duw op de knop




ALS WE GEEN INSULINEDRUPPEL ZIEN AAN DE TOP VAN DE NAALD, HERHALEN WE PUNT 2 EN 3.

fase 2

1. draai de knop op de gewenste hoeveelheid insuline.
's morgens: eenheden
's middags: eenheden
's avonds: eenheden
voor slapen: eenheden

We spuiten de insuline onderhuids in, 15 minuten vóór de maaltijd.

2. Maak een huidplooi en prik de naald op de top van de plooi, loodrecht door de huid.
's morgens: een horizontale buiklijn
's middags: een horizontale buiklijn
's avonds: een horizontale buiklijn
voor slapen: in de dij
3. duw hard op de knop (de knop wordt volledig terug ingeduwd).
4. wacht 5 seconden, en verwijder de naald.

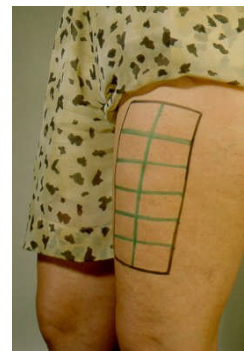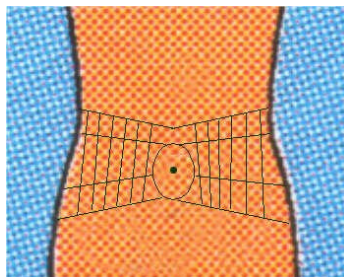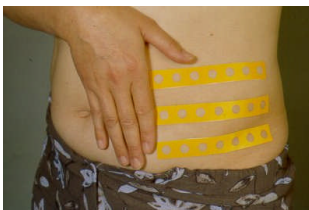

Verwisselen van penfill

De flacon is leeg als het rubbertje in de flacon te zien is in het controlevenstertje.

1. draai de naald van de pen.
2. draai de pen open
3. haal de lege flacon uit de pen.
4. draai de stamper terug naar de beginpositie (de stamper is volledig verdwenen)
5. steek een nieuwe flacon in de pen.
6. draai de twee delen van de pen terug in elkaar.
7. draai een nieuwe naald op de pen.

Veranderen van naald.

Dagelijks op de snelwerkende insuline
Tweewekelijks op de avondinsuline
(Max. 4 maal prikken met dezelfde naald)